



Solo PSV™

Наша первая подушка с комбинацией воздушно-пенного наполнителя с мульти-жесткой пеной.

SEATING
SYSTEMS

Сегодня VARILITE предлагает Solo PSV™, предназначенную для пользователей инвалидного кресла с риском повреждения тканей и с умеренной потребностью позиционирования. Врачи рекомендуют Solo Psv для пользователей с парализацией, ортопедическими и циркулирующими проблемами, а также для детей и людей пожилого возраста. Пользователи ценят Solo за малый вес, равномерное распределение давления, стабильность и комфорт ..




Solo PSV™

	12 x 12 (30 x 30 cm)	12 x 14 (30 x 35 cm)	14 x 14 (35 x 35 cm)	14 x 16 (35 x 40 cm)	16 x 16 (40 x 40 cm)
Сетчатая ткань	62215	62415	64415	64615	66615
Водонепроницаемая ткань	62225	62425	64425	64625	66625
	16 x 18 (40 x 45 cm)	18 x 16 (45 x 40 cm)	18 x 18 (45 x 45 cm)	20 x 18 (50 x 45 cm)	
Сетчатая ткань	66815	68615	68815	60815	
Водонепроницаем ткань	66825	68625	68825	60825	

Solo

	12 x 12 (30 x 30 cm)	12 x 14 (30 x 35 cm)	14 x 14 (35 x 35 cm)	14 x 16 (35 x 40 cm)	16 x 16 (40 x 40 cm)
Сетчатая ткань	62210	62410	64410	64610	66610
Водонепроницаем ткань	62220	62420	64420	64620	66620
	16 x 18 (40 x 45 cm)	18 x 16 (45 x 40 cm)	18 x 18 (45 x 45 cm)	20 x 18 (50 x 45 cm)	
Сетчатая ткань	66810	68610	68810	60810	
Водонепроницаем ткань	66820	68620	68820	60820	

Solo PSV™

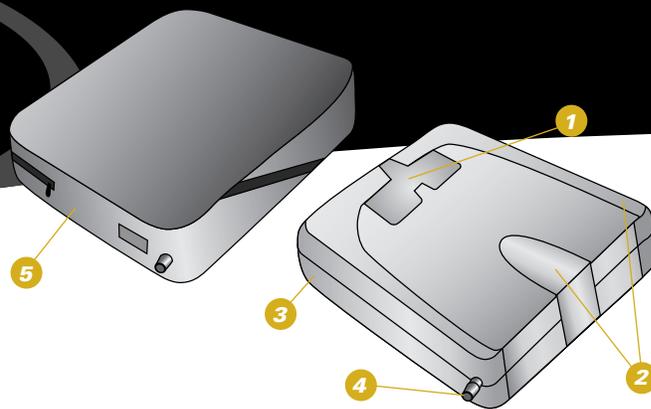

Равномерное распределение давления, стабильность позиционирования, комфорт и простота сделали Solo универсальной и эффективной подушкой для инвалидов. Добавляя к ней революционную PSV VARILITE регулировку (клапан настройки давления), мы сделали Solo PSV еще лучше, исключая регулировку подушки "на глаз". PSV регулирует подушку автоматически.

1. Воздушно-пенный наполнитель

Функциональные области подушки созданы из трех типов пены: Мягкая пена под сиделищный бугор, средней мягкости для нижней части бедра, мульти-жесткая для медиальной и боковой поддержки бедра.

Полиуретановый воздушно-пенный состав с открытыми порами связан с тканью, поэтому подушка удерживает воздух. При погружении пользователя в пену, клапан выпускает воздух, а пена принимает форму пользователя, благодаря этому давление равномерно распределяется по всей площади подушки.

2. Расположение Поддержек

Когда пользователь погружается в подушку, мульти-жесткая пена обеспечивает ему поддержку, а медиальная и боковые опоры сводят к минимуму вращение нижних конечностей. Тазового bucketing и предварительно сиделищный гребень помогает поддерживать тазовую положение. Бедрa корыта продвигать нейтральную позицию бедренной кости.

3. VARILITE's PSV исключает догадки в корректировке, а делает это автоматически

The PSV works by sensing the amount of internal cushion pressure. As air is released, internal pressure decreases and the user is immersed in the cushion for effective pressure distribution.

The PSV is marked with three pre-set positions, which provide the best range of immersion for most users. The therapist determines the PSV position that results in optimal pressure distribution for a client. (A therapist can mark a different position on the PSV if the user falls outside the pre-determined range.)

Sitting on a fully inflated Solo PSV, the client simply opens the PSV to the appropriate position. When the PSV senses that enough air has been released, it automatically shuts off the flow. The client closes the PSV. Adjustment is simple and consistent.

3. Ткань

Пена Solo не боится проколов и плотно покрыта водонепроницаемой, воздухонепроницаемой, нейлоновой тканью. Благодаря этому подушка Solo очень прочная и долговечная..

4. Регулируемый клапан

The Solo uses VARILITE's revolutionary new Pressure Setting Valve (patent pending).

The Solo PSV also is available with a traditional two-way VARILITE valve. Sitting on a fully inflated cushion, the user opens the valve and releases air, closing the valve when sitting on approximately 1/2 inch (13 mm) of air and foam.

5. Cover

The Solo PSV is available with a mesh, non-slip cover for pressure distribution. The underside is a rugged non-slip material with hook and loop for added security. Solo cover meets ISO 7176-16 ignition resistance standards for upholstered wheelchair components. Machine washable.

Ease of use improves user compliance. A therapist can select the Solo PSV with confidence, knowing that a client or caregiver can adjust the Solo PSV easily for optimal pressure distribution. The first time. Every time.



4000 1st Avenue South
Seattle, WA 98134
Phone: (800) 827-4548
Fax: (206) 343-5795
www.varilite.com

Authorized EU Representative:
Cascade Designs, Limited
Dwyer Road, Middleton, Co. Cork
Republic of Ireland

© 2003 Cascade Designs, Inc.

