



Reflex™

SEATING
SYSTEMS

Подушка с постоянной установкой (не регулируемая) для пользователей инвалидного кресла с риском поражения тканей.

Рекомендуется для пользователей с умеренным риском поражения тканей. Терапевты ценят подушку Reflex, потому что она не требует корректировки и запоминает анатомическую форму тела пользователя , обеспечивая равномерное распределение давления, комфорт и стабильность.

Reflex подушка идеально подходит для домов престарелых, больницы, а также для инвалидов колясочников, которые нуждаются в эффективной защите кожи и не дорогой подушке.



Пользователи ценят простоту и удобство использования рефлекторной подушки. Ультра-легкая конструкция подушки Reflex помогает экономить расход энергии пользователя, который передвигается на коляске с ручным приводом

Reflex™

Cover: Incontinence

See price list for size availability
HCPSC Code E2603

1. Воздушно-пенный наполнитель

Reflex пена имеет функциональные зоны, созданные двумя типами пены и площадью перфорации. Плотная пена используется по периметру и в зоне среднего разделителя бедра. Пена средней плотности используется для желобов бедер и в сакрально-седалищной области используется перфорированная пена, которая обеспечивает максимальную защиту, чувствительным к пролежням, седалищным буграм.

Reflex пены плотно соединена с покрывающей её тканью и поэтому хорошо удерживает воздух. Воздушно-пенный наполнитель сочетает в себе лучшие свойства воздуха и пены и обеспечивает превосходную защиту коже. Воздух поддерживает нагрузку, в то время как пена сохраняет воздух там, где это необходимо, и обеспечивает стабильность. Пена принимает форму пользователя а вес пользователя равномерно распределяется по поверхности подушки.

2. Независимое исследование показало, VARILITE® воздушно-пенный наполнитель имеет противоударные и антивибрационные свойства (RESNA 2000).

3. Воздушная пена не боится проколов и покрыта прочной водостойкой тканью из полиэстера.

4. Устройство воздушного выпуска

Встроенное устройство воздушного выпуска (ожидание патента) автоматически выпускает часть воздуха, когда пользователь находится на подушке. Воздушно-выпускное контролирует нагрузку погружения пользователя и не допускает погрузиться до основания подушки. Когда нагрузки нет, подушка снова надувается.


5. Покрытие (чехол)

Подушка Reflex имеет, водонепроницаемым чехлом. Основание подушки покрыто прочным не скользящим материалом со специальными креплениями для дополнительной безопасности. Можно стирать в машине.

Картография сравнения давления


Нерегулируемая подушка Reflex даже после длительного использования, обеспечивает надежную защиту кожи и равномерное распределение давления, также как и новая.

Картография распределения давления новой подушки Reflex

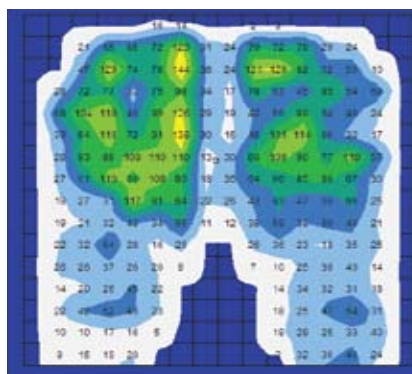

front of cushion

Картография распределения давления подушки после длительного использования

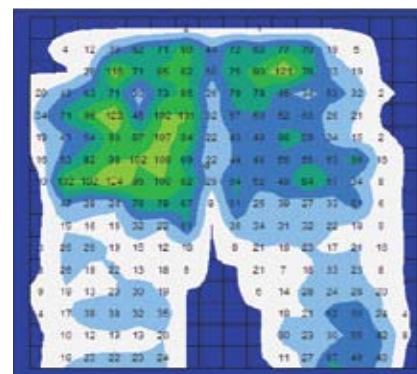

front of cushion

*cycle compressed 20,000 times @ 175lbs